

HORIZON[®] S5



Стационарный кислородный концентратор (5л.)

Horizon[®] S5 – самый тихий компактный кислородный концентратор на рынке.

Кислородный концентратор Horizon[®] S5 - отличный выбор для домашнего использования.

Ультратихий

Высокочистый кислород

Надёжный

Простой и понятный в использовании

SCALEO
MEDICAL

Инновационные решения в области респираторной поддержки

КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



УЛЬТРАТИХИЙ

Horizon® S5 – кислородный концентратор, разработанный французскими инженерами. Уровень шума прибора составляет 45 дБ и варьируется в зависимости от выбранного потока.



ЛЕГКИЙ

Благодаря эргономичному и компактному дизайну, вес кислородного концентратора Horizon® S5 составляет всего 15,5 кг, а это в свою очередь снижает затраты на доставку и хранение. Кроме того, вращающиеся колеса гарантируют отличную мобильность в помещении.



НАДЕЖНЫЙ

Мы знаем, что надежность – это самое главное качество, на которое обращает внимание пациент, выбирая свой кислородный концентратор. Поэтому Horizon® S5 можно использовать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Независимо от выбранного режима, аппарат обеспечивает концентрацию чистого кислорода с 93 % (± 3 %).



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

Horizon® S5 легко адаптируется к любым назначениям и видам кислородной терапии, благодаря гибкому устройству управления регулятора.



БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Кислородный концентратор Horizon® S5 оснащен алюминиевой насадкой на выходном отверстии и автоматическим выключателем. Это защищает аппарат от любых электрических неисправностей. Если чистота кислорода опускается ниже 82 %, то срабатывает аварийная система оповещения.



ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

Контроль и обслуживание осуществляются в соответствии с французскими нормами. Соблюдение простых мер гигиены будет достаточно, чтобы обеспечить длительный срок службы фильтров и внутренних деталей устройства.



РЕНТАБЕЛЬНЫЙ

Его низкое энергопотребление – это экономически эффективное решение для пациентов, находящихся на длительной кислородной терапии. Кроме того, при работе прибор выделяет достаточно малое количество тепла.



ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Настройки кислородного концентратора Horizon® S5 просты и понятны, что делает аппарат доступным для пациентов с ограниченными сенсорными возможностями.


ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТ HORIZON S5


В комплект с кислородным концентратором Horizon® S5 входит всё необходимое для его немедленного использования.

В комплект входят:


- Кислородный концентратор Horizon® S5
- Руководство пользователя
- Увлажнитель кислорода с защитным клапаном
- Соединительная трубка для увлажнителя кислорода
- Запасной фильтр

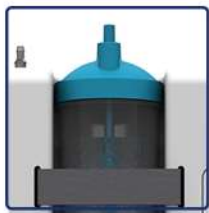

Лента фиксатор Velcro позволяет использовать аппарат совместно с сертифицированными увлажнителями кислорода

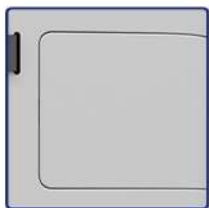

Легкий доступ к фильтрам

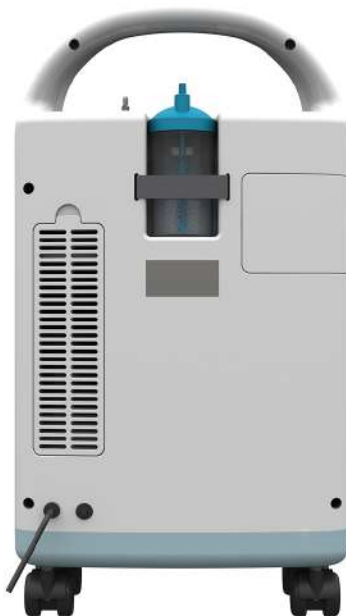

ВИД СЗАДИ



ВИД СПЕРЕДИ



Производительность кислорода до 5 л / мин



Вращающиеся колёса с тормозом




Долговечность службы аппарата при интенсивном использовании

SCALEO
MEDICAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (длина x ширина x высота)	24 x 38 x 66 см	Напряжение и частота	220 В ± 22 В / 50 Гц ± 1 Гц
Вес	15,5 кг	Совместимость с увлажнителями	Все сертифицированные типы увлажнителей кислорода
Уровень шума (в режиме «2»)	≤ 45 дБ	Давление на выходе	0,05 ± 10 % МПа
Чистота кислорода	93 % (± 3 %)	Требования к условиям при эксплуатации	Температура: от +10 до 37 °С Относительная влажность: 20 – 65 %
Режим работы	Непрерывный поток	Требования к условиям хранения	Температура: от -30 до 70 °С Относительная влажность: 15 – 95 %
Объем кислорода в минуту	0,5 – 5 л мин	Гарантия	3 года
Время работы	24/7		
Потребление энергии	320 Вт		

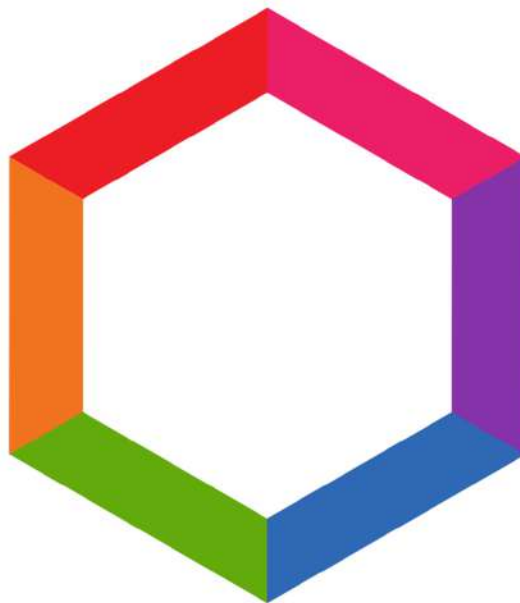

Новаторы в индивидуальной
профилактической телемедицине

SCALEO
M E D I C A L

Россия, г. Москва
+7 495 7861829
www.scaleomedical.com/ru
contact@scaleomedical.com

CE